



Hiper Açılı Bıçak Tekniği




- 1** Bıçağın orta kısmını yerleştirin ve dilin posterior kısmını geçene kadar ucu ilerletin.

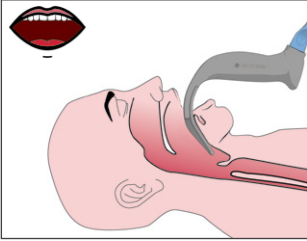


- 2** Epiglottu tanımlayın ve glotisı görebilmek için bıçağı vallekulanın içine ilerletin.

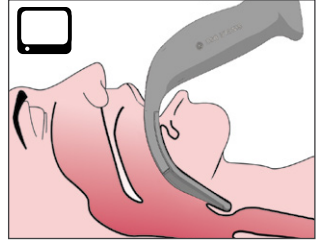


- 3** Bir GlideRite stileyi kullanarak (isteğe bağlı), ET tüpü bıçağın sağ tarafı boyunca yerleştirin.

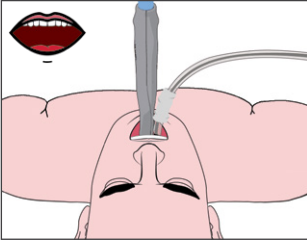

- 4** Entübasyonu tamamlayın.

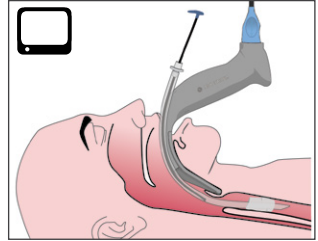

- 5** GlideRite stileyi çıkarmak için hastanın ayaklarına doğru dışarı çekin.

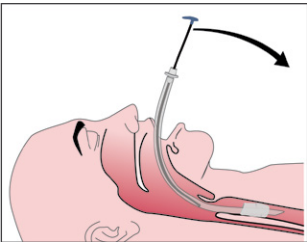

 — Adım esnasında ağzın içine bakın.

 — Adım esnasında monitöre bakın.



Önemli: Bu belge yalnızca hızlı referans içindir. Talimatların tamamı için bkz. verathon.com/service-and-support adresindeki Çalıtırma ve Bakım Kılavuzu.



Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Kanada
Tel.: +1 604 439 3009
Faks: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Hollanda
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Faks: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, ABD
Tel.: +1 800 331 2313 (Yalnızca ABD ve Kanada)
Tel.: +1 425 867 1348 Faks: +1 425 883 2896



CH

Anandic Medical Systems AG
Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
İsviçre



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
İsviçre

Verathon Medical (Avustralya) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Avustralya
Tel: 1800 613 603 / Faks: 1800 657 970 (Avustralya içi)
Tel.: +61 2 9431 2000 / Faks: +61 2 9475 1201 (Uluslararası)

verathon

GlideRite, Verathon ve ilgili semboller, Verathon Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
Diğer tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-TRTR REV-02